

Thank you for choosing Juzo, an international leader in medical compression garments since 1912.

Manufactured with care and detail, your Juzo Compression Wrap has several features that provide therapy, comfort, versatility and superior fit, including:

- Short Stretch Wrap - Working pressure.
- Cross Connect - Keeps the arm wrap in place making it easy to put on and take off.
- Gap resistant - Special notches and minimal overlying straps resist gapping and bulk.
- Reversible - Worn in either beige or black

Included In This Package:

- Juzo Compression Wrap
- Juzo Hook Fasteners

Care and Maintenance

- Remove all the half circle hook fasteners from the straps
- Machine wash warm
- A garment bag is strongly recommended
- Tumble dry low
- DO NOT USE: bleach, chlorine, fabric softeners, or other laundry additives
- Store garments in a dry place at room temperature

Return Policy

Should it be necessary to return your garment for evaluation, Juzo requires that the garment be laundered (for hygienic reasons) prior to returning to the original place of purchase.

Fabric

100 % Nylon / 100% Neoprene
Not made with natural rubber latex.

Instructions for Use

It is recommended that you consult with your medical professional and fitter for proper guidelines on the use and application of this product. If you experience any discomfort, immediately remove the short-stretch compression wrap and consult with your medical professional.

- Juzo Compression Wrap is designed to be reversible. The half circle hook fasteners need to be attached to the garment on the opposing side of the color to be worn.
- If worn with a Juzo Compression Hand Wrap, the Arm Wrap should be put on first, followed by the Juzo Compression Hand Wrap placed over the Arm Wrap.

Indications

Mild to severe lymphatic edema, mild to severe lipedema

Contraindications

Absolute: peripheral arterial disease, decompensated heart diseases, septic phlebitis, phelgmasia coerulea dolens

Relative: Arm infection, Intolerance to compression or garment fabric, sensory disturbance to the limb.

Cautions

No side effects are currently known. However, if a negative result should occur (i.e. skin irritations) from the use of our products, please discontinue use of the garment and consult with a medical professional. The manufacturer is not liable for damage / injuries which have been caused by improper handling or misuse.

Steps to Putting on the Arm Wrap

1. Attach the hook fasteners to the straps on the side opposite of the color to be worn. For example, if beige is the desired color, then the fasteners should be applied to the black side of the garment.
2. Gently fold the fasteners over onto themselves to prevent the fasteners from inadvertently attaching to the garment. Each fastener can then be unfolded before attaching.
3. Slide your arm into the wrap until the seam at the center of the wrap is positioned at the elbow.
4. Secure the bottom strap (wrist) of the wrap by pulling and fastening the strap. The strap should be just tight enough to gently hug the arm and hold the garment in place.
5. Continue working up the arm and fasten the remaining straps using enough tension for the straps to gently hug the arm.
6. Once each strap is in place, start at the bottom of the arm and tighten each strap until it feels comfortably snug against the limb.
7. Continue working up the arm and pull and tighten each strap. Make sure there are no gaps between straps. This can be best achieved by having adjacent straps slightly overlap and by inserting one strap into the notch.
8. The wrap should have a snug fit but not be painfully tight. If you feel any pain or discomfort or the wrap feels too loose, then repeat steps 4 through 7, adjusting the level of tension that is applied.

Note: If using a Juzo Compression Hand Wrap, see care and application directions for use.



JUZO COMPRESSION WRAP

Short Stretch Compression Wrap

Venda de compresión de elasticidad reducida
Bandage compressif à extensibilité courte

- High Working Pressure
- Cross Connect

REVERSIBLE

beige or black garment

Freedom in Motion



For over 100 years, our family philosophy has been that medical garments should not inhibit a person's lifestyle.


Venda de compresion de elasticidad reducida para piernas saludables y siempre en movimiento.

Bandage compressif à extensibilité courte pour aider à améliorer la circulation et garder

les jambes en bonne santé et en mouvement.


* Juzo is a registered trademark of Julius Zorn, Inc. © 2019 Julius Zorn Incorporated

1912-2019

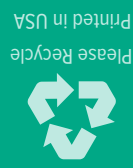

Please Recycle
Printed in USA

GARMENT CONTENTS & CARE
See inside of insert for material contents & proper care.

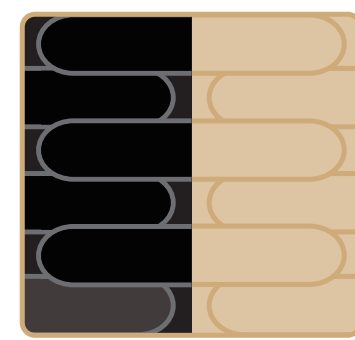


REVERSIBLE
beige garment or black garment

Manufactured By
Julius Zorn, Inc • PO Box 1088
Cuyahoga Falls, OH 44223
Distributed by Juzo USA
www.juzousa.com
Distributed by Juzo Canada LTD.
www.juzo.ca

The Juzo Compression Wrap will offer a varying degree of pressure that is dependent on the tension of the garment and the position and activity level of the wearer. Typical resting pressure will range between 20-40 mmHg and working pressure will range between 30-60 mmHg.

C E G	CG Regular < 17" / 43cm					CG Long > 17" / 43cm	
	XS	S	M	L	XL		
27-36 cm	30-39 cm	33-44 cm	35-49 cm	40-56 cm	10 1/2"-14 1/4"	11 3/4"-15 1/2"	13 3/4"-19 1/4"
23-32 cm	24-34 cm	26-36 cm	29-42 cm	31-46 cm	9"-12 1/2"	9 1/2"-13 1/2"	10 1/4"-14 1/4"
16-19 cm	17-20 cm	18-22 cm	20-26 cm	21-29 cm	6 1/4"-7 1/2"	6 3/4"-8"	7"-8 3/4"
					8 1/4"-11 1/2"	8 3/4"-11 1/2"	8"-10 1/4"

Note: This size chart is not intended to replace a professional fitting by a qualified fitter.

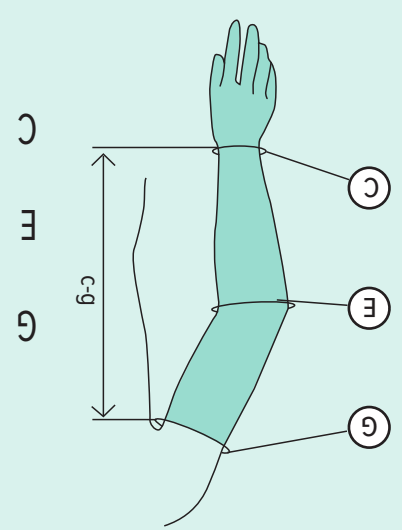

Versatile and effective therapy.

The Juzo CompressionWrap™ is an effective and easier-to-use alternative to bandaging. The versatile wrap delivers therapeutic compression and increased working pressure to improve your quality of life.

Short stretch for working pressure



Special notches and minimal overlying straps resist gapping and bulk



Supports movement to encourage physical activity.



Juzo Compression Wraps are made in the U.S.A.



Gracias por elegir Juzo, líder internacional en productos de compresión desde 1912.

Fabricado con cuidado y atención en los detalles, el vendaje de compresión Juzo cuenta con diversas características que proporcionan terapia, confort, versatilidad y ajuste superior, como por ejemplo:

- Vendaje de elasticidad reducida: presión de trabajo.
- Banda de conexión cruzada: mantiene el vendaje para brazo en su lugar facilitando su colocación y extracción.
- Resistente a hendiduras: ranuras especiales y mínimas tiras superpuestas que resisten hendiduras y bultos.
- Reversible: se puede usar del lado beige o negro.

El paquete incluye lo siguiente:

- Vendaje de compresión Juzo
- Ganchos sujetadores Juzo

Cuidado y mantenimiento

- Retire todos los ganchos sujetadores con forma de semicírculo de las tiras.
- Lave a máquina con agua tibia.
- Se recomienda usar una funda para ropa.
- Seque a máquina a baja temperatura.
- NO USE: lavandina, cloro, suavizante para ropa ni otros aditivos de lavandería.
 - Guarde las prendas en un lugar seco a temperatura ambiente.

Política de devolución

En caso de que sea necesario devolver la prenda para su evaluación, Juzo exige que esta se lave (por motivos de higiene) antes de su devolución al lugar de compra original.

Tela

100 % nylon/100 % neopreno (sin látex de caucho natural)



Instrucciones de uso

Se recomienda consultar con su médico y responsable de realizar los ajustes para conocer las indicaciones apropiadas sobre el uso y la aplicación de este producto. Si experimenta algún tipo de molestia, retire el vendaje de compresión de elasticidad reducida de inmediato y consulte con su médico.

El vendaje de compresión Juzo está diseñado para ser reversible. Los ganchos en forma de semicírculo se deben sujetar a la prenda del lado opuesto al color que se va a usar.

Si se usa junto con un vendaje de compresión para mano Juzo, el vendaje para brazo se debe poner primero, y luego sobre este se debe colocar el vendaje de compresión para mano Juzo.



Indicaciones

Linfedema leve a agudo, lipedema leve a agudo

Contraindicaciones

Absolutas: enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmasia cerúlea dolorosa

Relativas: Infección en el brazo, intolerancia a la compresión o al material de la prenda, trastorno sensorial en el miembro.

Precauciones

Actualmente, no se conocen efectos secundarios. Sin embargo, si se produjeran resultados negativos (como irritación cutánea) debido al uso de nuestros productos, suspenda el uso de la prenda y consulte con su médico. El fabricante no es responsable por daños /lesiones causados por el uso indebido o el manejo incorrecto.



Pasos para colocar el vendaje para brazo



1. Sujete los ganchos a las tiras del lado opuesto al color que se va a usar. Por ejemplo, si el color elegido es el beige, entonces los ganchos se deben colocar del lado negro de la prenda.
2. Doble los ganchos con cuidado sobre sí mismos para evitar que se adhieran accidentalmente a la prenda. Luego, cada gancho se puede desdoblar antes de sujetarlo.
3. Deslice su brazo dentro del vendaje hasta que la costura del centro esté ubicada a la altura del codo.
4. Asegure la tira inferior (muñeca) del vendaje tirando de esta y ajustándola. Debe estar lo suficientemente ajustada para ceñir el brazo con suavidad y mantener la prenda en su lugar.
5. Siga hacia arriba y ajuste las tiras restantes aplicando la tensión suficiente para que estas ciñan el brazo con suavidad.
6. Una vez que cada tira esté en su lugar, comience por el extremo inferior y ajuste cada una hasta que se adapte cómodamente alrededor del miembro.
7. Siga hacia arriba, tirando y ajustando cada tira. Asegúrese de que no haya espacios entre las tiras. Esto se puede lograr mejor haciendo que las tiras adyacentes se superpongan levemente e insertando una tira en la ranura.
8. El vendaje debe tener un ajuste ceñido pero no provocar dolor. Si siente dolor o incomodidad, o si las tiras están demasiado flojas, entonces repita los pasos 4 a 7, ajustando el nivel de tensión que se aplica.



Nota: Si usa un vendaje de compresión para mano Juzo, consulte las indicaciones sobre cuidado y aplicación para su uso.

Merci de choisir Juzo, un chef de file international dans les vêtements de compression médicaux depuis 1912.

Fabriqué avec soin et le souci du détail, votre Bandage compressif Juzo possède plusieurs caractéristiques qui offrent thérapie, confort, versatilité et ajustement supérieur, notamment :

- Bandage à extensibilité courte - Pression de travail.
- Bande d’attache en croix - Garde le bandage pour le bras en place le rendant facile à placer et à enlever.
- Résiste aux écarts - Des crans spéciaux et une superposition minimale des sangles résistent à la formation d’écarts et de gonflant.
- Réversible - Porté soit en beige ou en noir



Inclus dans ce paquet :

- Bandage compressif Juzo
- Fermetures à crochets Juzo



Soin et entretien

- Enlever toutes les fermetures à crochets en demi-cercle des sangles
- Laver à la machine à l’eau tiède
- Un sac de vêtements est fortement recommandé
- Séchage par culbutage à basse température
- NE PAS UTILISER : agent de blanchiment, chlore, assouplissants, ou autres additifs de blanchisserie
 - Entreposer les vêtements dans un endroit sec à température ambiante



Politique de retour

S’il s’avère nécessaire de retourner votre vêtement pour une inspection, Juzo vous demande de bien le laver (pour des raisons hygiéniques) avant de le retourner au lieu d’achat d’origine.



Tissu

100 % Nylon / 100 % Néoprène. Pas fait de latex en caoutchouc naturel.



Mode d’emploi

Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé et essayeur pour les bonnes directives sur l’utilisation et l’application de ce produit. Si vous ressentez une gêne quelconque, enlevez immédiatement le bandage compressif à extensibilité courte et consultez votre professionnel de la santé.

• Le Bandage compressif Juzo est conçu pour être réversible. Les fermetures à crochets en demi-cercle doivent être attachées au vêtement sur le côté opposé de la couleur à être portée.

• Si porté avec un Bandage compressif pour la main Juzo, le Bandage pour le bras doit être mis en premier, suivi par le Bandage compressif pour la main Juzo placé sur le Bandage pour le bras.



Indications

CÈdème lymphatique léger à grave, lipœdème léger à grave



Contre-indications

Absolue : maladie artérielle périphérique, cardiopathies décompensées, phlébite septique, phelgmasia cerulea dolens



Relative : Infection du bras, intolérance à la compression ou aux tissus de vêtement, trouble sensoriel du membre.



Mises en garde

Aucun effet secondaire n’est actuellement connu. Toutefois, si un résultat négatif se produirait (c.-à-d. des irritations de la peau) suite à l’utilisation de nos produits, veuillez cesser l’utilisation du vêtement et consultez un professionnel de la santé. Le fabricant n’est pas responsable des dommages /blessures qui ont été causées par une manipulation incorrecte ou une mauvaise utilisation.



Étapes pour mettre le Bandage pour le bras



1. Attachez les fermetures à crochets aux sangles sur le côté opposé de la couleur à être portée. Par exemple, si beige est la couleur désirée, alors les fermetures doivent être appliquées au côté noir du vêtement.
2. Rabattez soigneusement les fermetures sur elles-mêmes pour empêcher que les fermetures s’attachent par inadvertance au vêtement. Chaque fermeture peut être alors dépliée avant d’attacher.
3. Glissez votre bras dans le bandage jusqu’à ce que la couture au centre du bandage soit positionnée au coude.
4. Fixez la sangle inférieure (poignet) du bandage en tirant et en attachant la sangle. La sangle doit être juste assez serrée pour envelopper doucement le bras et tenir le vêtement en place.
5. Continuez en remontant le bras et attachez les sangles restantes en utilisant une tension suffisante pour que les sangles enveloppent doucement le bras.
6. Une fois que chaque sangle est en place, commencez au bas du bras et serrez chaque sangle jusqu’à ce qu’elle soit confortablement serrée contre le membre.
7. Continuez en remontant le bras et tirez et serrez chaque sangle. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’écarts entre les sangles. Le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est d’avoir des sangles adjacentes légèrement chevauchées et en insérant une sangle dans le cran.
8. Le bandage devrait être bien ajusté mais pas douloureusement serré. Si vous ressentez de la douleur ou une gêne ou si le bandage semble trop détendu, alors répétez les étapes 4 à 7, en ajustant le niveau de tension qui est appliqué.



Remarque : Si vous utilisez un Bandage compressif pour la main Juzo, consultez les directives concernant le soin et l’application pour l’utilisation.