

Thank you for choosing Juzo, an international leader in medical compression garments since 1912.

Manufactured with care and detail, your Juzo Compression Wrap has several features that provide therapy, comfort, versatility and superior fit, including:

- Working pressure - Short stretch for a high working pressure.
- EZ pull tab - Aid for hassle free application.
- Reversible - Worn in either beige or black

#### Included In This Package:

- Juzo Compression Wrap
- Juzo Hook Fasteners

#### Care and Maintenance

- Remove all the half circle hook fasteners from the straps
- Machine wash warm
- A garment bag is strongly recommended
- Tumble dry low
- DO NOT USE: bleach, chlorine, fabric softeners, or other laundry additives
- Store garments in a dry place at room temperature

#### Return Policy

Should it be necessary to return your garment for evaluation, Juzo requires that the garment be laundered (for hygienic reasons) prior to returning to the original place of purchase.

#### Fabric

100 % Nylon / 100% Neoprene  
Not made with natural rubber latex.

#### Instructions for Use

It is recommended that you consult with your medical professional and fitter for proper guidelines on the use and application of this product. If you experience any discomfort, immediately remove the short-stretch compression wrap and consult with your medical professional.

- Juzo Compression Wrap is designed to be reversible. The half circle hook fasteners need to be attached to the garment on the opposing side of the color to be worn.

#### Indications

Primary & secondary varices, chronic venous insufficiency, post-thrombotic syndrome, venous stasis ulcers, pre and post-vein procedure and lymphatic edema.

#### Contraindications

Absolute: peripheral arterial disease, decompensated heart diseases, septic phlebitis, phlegmasia coerulea dolens.

Relative: Leg infection, intolerance to compression or garment fabric, sensory disturbance to the limb.

#### Cautions

No side effects are currently known. However, if a negative result should occur (i.e. skin irritations) from the use of our products, please discontinue use of the garment and consult with a medical professional. The manufacturer is not liable for damage /injuries which have been caused by improper handling or misuse.

#### Steps to Putting on the Knee Wrap

1. Prior to applying the knee wrap you should have the calf wrap segment on your leg.
2. Attach the hook fasteners to the straps on the side opposite of the color to be worn. For example, if beige is the desired color, then the fasteners should be applied to the black side of the garment.
3. While sitting down, extend your leg and position the wrap on your knee so that the horizontal seam aligns with the bend in the back of your knee.
4. Secure the top strap of the wrap by counter pulling the top strap and the top EZ Pull on the opposite side of the garment at the same time. The strap should be just tight enough to gently hug the leg and hold the garment in place.
5. After the top strap is in place, pull the bottom knee strap and in- unison pull the EZ tab on the opposite side of the garment.
6. Once the knee wrap is positioned on your leg again pull the top strap along with the EZ Pull until it is comfortably snug. When pulling the strap, slightly pull it downward toward the knee center.
7. Repeat this step with the lower strap, only this time pull the lower strap upwards toward the knee center. The strap should be tightened until it is comfortably snug.
8. The wrap should have a snug fit but not be painfully tight. If you feel any pain or discomfort or the wrap feels too loose, then repeat steps 6 through 7, adjusting the level of tension that is applied.

Note: See care and application directions for use of Juzo Compression Wrap Thigh, Calf & Foot Segment.  
Extra fasteners are provided inside packaging.

# JUZO COMPRESSION WRAP

Short Stretch Compression Wrap

Venda de compresión de elasticidad reducida  
Bandage compressif à extensibilité courte

- High Working Pressure
- EZ Pull Tabs

**REVERSIBLE**  
beige or black garment

Freedom in Motion




For over 100 years, our family philosophy has been that medical garments should not inhibit a person's lifestyle.

Venda de compresión de elasticidad reducida para piernas saludables y siempre en movimiento.  
Bandage compressif à extensibilité courte pour aider à améliorer la circulation et garder les jambes en bonne santé et en mouvement.

Juzo is a registered trademark of Julius Zorn, Inc. © 2019 Julius Zorn Incorporated. INKNEWRAP 1218 Printed in USA Please Recycle

GARMENT CONTENTS & CARE  
See inside of insert for material contents & proper care.

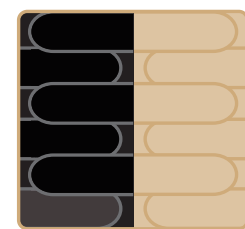

Manufactured By  
Julius Zorn, Inc. • PO Box 1088  
Cuyahoga Falls, OH 44223  
Distributed by Juzo USA  
www.juzousa.com  
Distributed by Juzo Canada LTD.  
www.juzo.ca

The Juzo Compression Wrap will offer a varying degree of pressure that is dependent on the tension of the garment and the position and activity level of the wearer.

Size Chart For Juzo Compression Knee Wrap

Note: This size chart is not intended to replace a professional fitting by a qualified fitter.

Patella	E	Mid	30-36 cm	11 3/4"-14 1/4"	36-42 cm	14 1/4"-16 1/2"	42-48 cm	16 1/2"-19"	48-55 cm	19"-21 3/4"	55-62 cm	21 3/4"-24 1/4"	62-70 cm	21 3/4"-27 1/2"
			S		M		L		XL		2XL		3XL	

PCSZ-01-55

- RESISTANT: Special stretch for a high working pressure
- USA: Special notches and minimal overlying straps resist gapping and bulk
- EZ PULL TABS: Pull tab aid for hassle-free application
- MADE IN THE USA: Juzo Compression Wraps are made in the U.S.A.

The Juzo CompressionWrap™ is an effective and easier-to-use alternative to bandaging. The versatile wrap delivers therapeutic compression and increased working pressure to improve your quality of life.

## Versatile and effective therapy.



Gracias por elegir Juzo, líder internacional en productos de compresión desde 1912.

Fabricado con cuidado y atención en los detalles, el vendaje de compresión Juzo cuenta con diversas características que proporcionan terapia, confort, versatilidad y ajuste superior, como por ejemplo:

- Presión de trabajo: elasticidad reducida para una alta presión de trabajo.
- Lengüeta (E-Z Pull Tab): ayuda a lograr una aplicación sin inconvenientes.
- Reversible: se puede usar del lado beige o negro.

El paquete incluye lo siguiente:

- Vendaje de compresión Juzo
- Ganchos sujetadores Juzo

Cuidado y mantenimiento

- Retire todos los ganchos sujetadores con forma de semicírculo de las tiras.
- Lave a máquina con agua tibia.
- Se recomienda usar una funda para ropa.
- Seque a máquina a baja temperatura.
- NO USE: lavandina, cloro, suavizante para ropa ni otros aditivos de lavandería.
- Guarde las prendas en un lugar seco a temperatura ambiente.

Política de devolución

En caso de que sea necesario devolver la prenda para su evaluación, Juzo exige que esta se lave (por motivos de higiene) antes de su devolución al lugar de compra original.

Tela

100 % nylon/100 % neopreno - Sin látex de caucho natural

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar con su médico y responsable de realizar los ajustes para conocer las indicaciones apropiadas sobre el uso y la aplicación de este producto. Si experimenta algún tipo de molestia, retire el vendaje de compresión de elasticidad reducida de inmediato y consulte con su médico.

- El vendaje de compresión Juzo está diseñado para ser reversible. Los ganchos en forma de semicírculo se deben sujetar a la prenda del lado opuesto al color que se va a usar.

Indicaciones

Várices primarias y secundarias, insuficiencia venosa crónica, síndrome postrombótico, úlceras venosas por estasis, procedimiento pre- y posvenoso, edema linfático.

Contraindicaciones

Absolutas: enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmasia cerúlea dolorosa

Relativas: Infección en la pierna, intolerancia a la compresión o al material de la prenda, trastorno sensorial en el miembro.

Precauciones

Actualmente, no se conocen efectos secundarios. Sin embargo, si se produjeran resultados negativos (como irritación cutánea) debido al uso de nuestros productos, suspenda el uso de la prenda y consulte con su médico. El fabricante no es responsable por daños / lesiones causados por el uso indebido o el manejo incorrecto.

Pasos para colocar el vendaje para rodilla

1. Antes de colocar el vendaje para rodilla, debe tener el segmento de vendaje para pantorrilla en la pierna.
2. Sujete los ganchos a las tiras del lado opuesto al color que se va a usar. Por ejemplo, si el color elegido es el beige, entonces los ganchos se deben colocar del lado negro de la prenda.
3. Sentado, extienda la pierna y coloque el vendaje en la rodilla de forma tal que la costura horizontal se alinee con la flexión en la parte posterior de la rodilla.
4. Ajuste la tira superior del vendaje jalando de la tira superior y la lengüeta superior simultáneamente en sentido contrario del lado opuesto de la prenda. La tira debe estar lo suficientemente ajustada para ceñir con suavidad la pierna y mantener la prenda en su lugar.
5. Una vez que la tira esté en su lugar, jale de la tira inferior de la rodilla y de la lengüeta simultáneamente en el lado opuesto de la prenda.
6. Una vez que el vendaje para rodilla esté ubicado en la pierna, nuevamente jale de la tira superior junto con la lengüeta hasta que se adapte cómodamente. Cuando jale de la tira, hágalo suavemente hacia abajo en dirección al centro de la rodilla.
7. Repita este paso con la tira inferior, solo que esta vez jale de la tira inferior hacia arriba en dirección al centro de la rodilla. La tira se debe ajustar hasta que se adapte cómodamente.
8. El vendaje debe tener un ajuste ceñido pero no provocar dolor. Si siente algún tipo de dolor o molestia, o si el vendaje está demasiado flojo, repita los pasos 6 a 7, ajustando el nivel de tensión que se aplica.

Nota: Consulte las instrucciones de cuidado y aplicación para el uso del segmento de vendaje de compresión Juzo para pie y pantorrilla.

Sujetadores adicionales se proporcionan dentro del empaque.

Merci de choisir Juzo, un chef de file international dans les vêtements de compression médicaux depuis 1912.

Fabriqué avec soin et le souci du détail, votre Bandage Compressif Juzo possède plusieurs caractéristiques qui offrent thérapie, confort, versatilité et ajustement supérieur, notamment

- Pression de travail - Extensibilité courte pour une haute pression de travail.
- Tirette EZ – Aide pour une application sans problème.
- Réversible - Porté soit en beige ou en noir

Inclus dans ce paquet :

- Bandage compressif Juzo
- Fermetures à crochets Juzo

Soin et entretien

- Enlever toutes les fermetures à crochets en demi-cercle des sangles
- Laver à la machine à l'eau tiède
- Un sac de vêtements est fortement recommandé
- Séchage par culbutage à basse température
- NE PAS UTILISER : agent de blanchiment, chlore, assouplissants, ou autres additifs de blanchisserie
- Entreposer les vêtements dans un endroit sec à température ambiante

Politique de retour

S'il s'avère nécessaire de retourner votre vêtement pour une inspection, Juzo vous demande de bien le laver (pour des raisons hygiéniques) avant de le retourner au lieu d'achat d'origine.

Tissu - 100 % Nylon / 100 % Néoprène. Pas fait de latex en caoutchouc naturel.

Mode d'emploi

Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé et essayeur pour les bonnes directives sur l'utilisation et l'application de ce produit. Si vous ressentez une gêne quelconque, enlevez immédiatement le bandage compressif à extensibilité courte et consultez votre professionnel de la santé.

- Le Bandage compressif Juzo est conçu pour être réversible. Les fermetures à crochets en demi-cercle doivent être attachées au vêtement sur le côté opposé de la couleur à être portée.

Indications

Varices primaires et secondaires, insuffisance veineuse chronique, syndrome post-thrombotique, ulcères de stase veineuse, pré et post procédure veineuse et œdème lymphatique.

Contre-indications

Absolue : maladie artérielle périphérique, cardiopathies décompensées, phlébite septique, phlegmasia cerulea dolens.

Relative : Infection de la jambe, intolérance à la compression ou aux tissus de vêtement, trouble sensoriel du membre.

Mises en garde

Aucun effet secondaire n'est actuellement connu. Toutefois, si un résultat négatif se produirait (c.-à-d. des irritations de la peau) suite à l'utilisation de nos produits, veuillez cesser l'utilisation du vêtement et consultez un professionnel de la santé. Le fabricant n'est pas responsable des dommages / blessures qui ont été causées par une manipulation incorrecte ou une mauvaise utilisation.

Étapes pour mettre le Bandage pour le genou

1. Avant d'appliquer le bandage pour le genou, vous devriez avoir le segment de bandage pour le mollet sur votre jambe.
2. Attachez les fermetures à crochets aux sangles sur le côté opposé de la couleur à être portée. Par exemple, si beige est la couleur désirée, alors les fermetures doivent être appliquées au côté noir du vêtement.
3. En vous asseyant, étendez votre jambe et positionnez le bandage sur votre genou afin que la couture horizontale s'aligne avec le pli à l'arrière de votre genou.
4. Attachez bien la sangle supérieure du bandage en contre-tirant la sangle supérieure et la tirette EZ supérieure sur le côté opposé du vêtement en même temps. La sangle doit être juste suffisamment serrée pour envelopper délicatement la jambe et tenir le vêtement en place.
5. Une fois que la sangle supérieure est en place, tirez la sangle inférieure du genou et à l'unisson tirez la tirette EZ sur le côté opposé du vêtement.
6. Une fois que le bandage pour le genou est positionné sur votre jambe, tirez à nouveau la sangle supérieure avec la tirette EZ jusqu'à ce qu'elle soit confortablement ajustée. Lorsque vous tirez la sangle, tirez légèrement vers le bas vers le centre du genou.
7. Répétez cette étape avec la sangle inférieure, seulement cette fois, tirez la sangle inférieure vers le haut vers le centre du genou. La sangle doit être serrée jusqu'à ce qu'elle soit confortablement ajustée.
8. Le bandage devrait être bien ajusté mais pas douloureusement serré. Si vous ressentez de la douleur ou une gêne ou si le bandage semble trop détendu, alors répétez les étapes 6 à 7, en ajustant le niveau de tension qui est appliqué.

Remarque : Consultez les directives concernant le soin et l'application pour l'utilisation d'un Segment de mollet et pied de Bandage compressif Juzo.

Les fixations supplémentaires sont fournies à l'intérieur de l'emballage.