

- **Comfort** - Moisture & air permeable.
- **Working pressure** - Short stretch for a high working pressure.
- **Gap resistant** - Special notches and minimal overlying straps resist gapping and bulk.
- **EZ pull tab** - Aid for hassle free application.
- **Reversible** - Worn in either beige or black.

- Juzo Reversa Compression Wrap™
- Juzo Hook Fasteners

- Remove all the half circle hook fasteners from the straps.
- Machine wash warm.
- A garment bag is strongly recommended.
- Tumble dry low.
- DO NOT USE: bleach, chlorine, fabric softeners, or other laundry additives.
- Store garments in a dry place at room temperature.

Should it be necessary to return your garment for evaluation, Juzo requires that the garment be laundered (for hygienic reasons) prior to returning to the original place of purchase.

48% Nylon / 46% Polyurethane / 6% Spandex • Not made with natural rubber latex.

It is recommended that you consult with your medical professional and fitter for proper guidelines on the use and application of this product. If you experience any discomfort, immediately remove the short-stretch compression wrap and consult with your medical professional.

- Juzo Reversa Compression Wrap™ is designed to be reversible. The half circle hook fasteners need to be attached to the garment on the opposite side of the color to be worn.

Primary & secondary varices, chronic venous insufficiency, post-thrombotic syndrome, venous stasis ulcers, pre and post-vein procedure and lymphatic edema.





Absolute: peripheral arterial disease, decompensated heart diseases, septic phlebitis, phlegmasia coerulea dolens.

Relative: Leg infection, intolerance to compression or garment fabric, sensory disturbance to the limb.

No side effects are currently known. However, if a negative result should occur (i.e. skin irritations) from the use of our products, please discontinue use of the garment and consult with a medical professional. Juzo Silver Garments should be removed prior to MRI Scans & Cardiac Defibrillations.


The manufacturer is not liable for damage / injuries which have been caused by improper handling or misuse.

Prior to applying the thigh wrap you should have the knee wrap segment in place and on your leg. The thigh wrap should slightly overlap the top of the knee wrap.

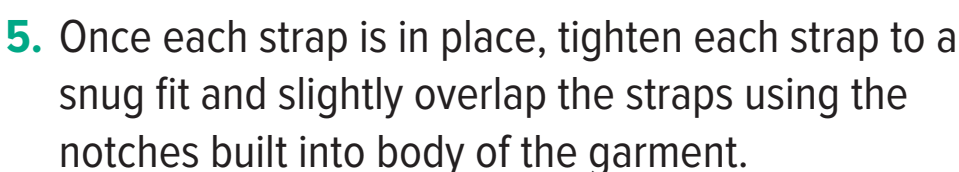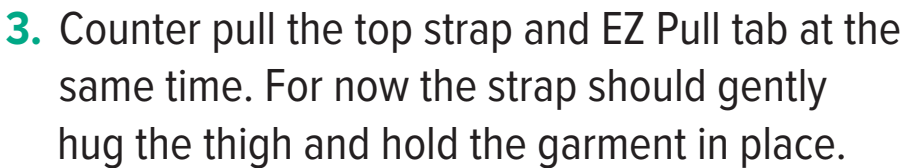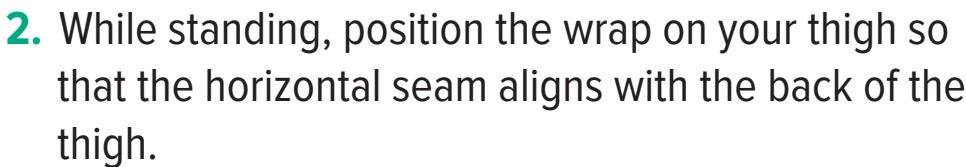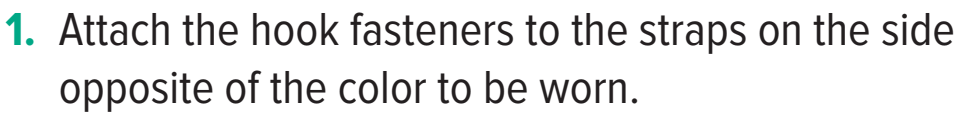

If you feel any pain or discomfort or the wrap feels too loose, then repeat steps adjusting the level of tension that is applied.

**Note:** See care and application directions for use of Juzo Compression Wrap Foot, Calf & Knee Segment. Extra fasteners are provided inside packaging.

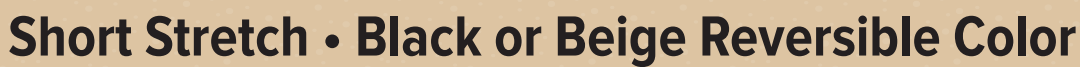

## Bandage compressif à extensibilité courte

- Moisture & Air Permeable
- High Working Pressure
- High Containment
- EZ Pull Tabs

Venda de compresion de elasticidad reducida para piernas saludables y siempre en movimiento. Bandage compresif a extensibilidad courte pour aider a ameliorer la circulation et garder les jambes en bonne santé et en mouvement.

© 2025 Julius Zorn Incorporated. JuZo is a registered trademark of Julius Zorn, Inc.

For over 100 years, our family philosophy has been that medical garments should not inhibit a person's lifestyle.

Distributed by Juzo USA [www.juzousa.com](http://www.juzousa.com)  
Distributed by Juzo Canada LTD. [www.juzo.ca](http://www.juzo.ca)

Manufactured By  
Julius Zorn, Inc  
Cuyahoga Falls, OH 44223

**GARMENT CONTENTS & CARE**  
See inside of insert for material  
contents & proper care.

The Juzo Compression Wrap will offer a varying degree of pressure that is dependent on the tension of the garment and the position and activity level of the wearer.

Special notches and minimal overlying straps resist gapping and bulk



The Juzo Reversa Compression Wrap™ is an effective and easier-to-use alternative to bandaging. The versatile wrap delivers therapeutic compression and increased working pressure to improve your quality of life.

## Versatile and effective therapy

**Gracias por elegir Juzo, líder internacional en productos de compresión desde 1912.**

Fabricado con cuidado y atención en los detalles, el vendaje de compresión Juzo cuenta con diversas características que proporcionan terapia, confort, versatilidad y ajuste superior, como por ejemplo:

- **Presión de trabajo:** elasticidad reducida para una alta presión de trabajo.
- **Resistente a hendiduras:** ranuras especiales y mínimas tiras superpuestas que resisten hendiduras y bultos.
- **Lengüeta (E-Z Pull Tab):** ayuda a lograr una aplicación sin inconvenientes.
- **Reversible:** se puede usar del lado beige o negro.

**El paquete incluye lo siguiente:**

- Vendaje de compresión Juzo
- Ganchos sujetadores Juzo

**Cuidado y mantenimiento**

- Retire todos los ganchos sujetadores con forma de semicírculo de las tiras.
- Lave a máquina con agua tibia.
- Se recomienda usar una funda para ropa.
- Seque a máquina a baja temperatura.
- NO USE: lavandina, cloro, suavizante para ropa ni otros aditivos de lavandería.
- Guarde las prendas en un lugar seco a temperatura ambiente.

**Política de devolución**

En caso de que sea necesario devolver la prenda para su evaluación, Juzo exige que esta se lave (por motivos de higiene) antes de su devolución al lugar de compra original.

**Tela**

48% Nylon / 46% Polyurethane / 6% Spandex - Sin látex de caucho natural- Sin látex de caucho natural

**Instrucciones de uso**

Se recomienda consultar con su médico y responsable de realizar los ajustes para conocer las indicaciones apropiadas sobre el uso y la aplicación de este producto. Si experimenta algún tipo de molestia, retire el vendaje de compresión de elasticidad reducida de inmediato y consulte con su médico.

- El vendaje de compresión Juzo está diseñado para ser reversible. Los ganchos en forma de semicírculo se deben sujetar a la prenda del lado opuesto al color que se va a usar.

**Indicaciones**

Várices primarias y secundarias, insuficiencia venosa crónica, síndrome postrombótico, úlceras venosas por estasis, procedimiento pre- y posvenoso, edema linfático.

**Contraindicaciones**

Absolutas: enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmasia cerúlea dolorosa.  
Relativas: Infección en la pierna, intolerancia a la compresión o al material de la prenda, trastorno sensorial en el miembro.

**Precauciones**

Actualmente, no se conocen efectos secundarios. Sin embargo, si se produjeran resultados negativos (como irritación cutánea) debido al uso de nuestros productos, suspenda el uso de la prenda y consulte con su médico. El fabricante no es responsable por daños/lesiones causados por el uso indebido o el manejo incorrecto.

**Pasos para colocar el vendaje para muslo**

1. El vendaje para muslo se debe colocar después de colocar el segmento de venda je para rodilla en la pierna.
2. Sujete los ganchos a las tiras del lado opuesto al color que se va a usar. Por ejemp lo, si el color elegido es el beige, entonces los ganchos se deben colocar del lado negro de la prenda.
3. Doble los dos ganchos inferiores con cuidado sobre sí mismos para evitar que se adhieran accidentalmente a la prenda. Luego, cada gancho se puede desdoblar antes de sujetarlo.
4. Parado, la parte inferior del vendaje para muslo debe superponerse con la parte superior del vendaje para rodilla.
5. Ajuste la tira superior del vendaje para muslo jalando de la tira superior y la lengüe ta superior simultáneamente en sentido contrario. La tira debe estar lo suficientemente ajustada para ceñir el muslo con suavidad y mantener la prenda en su lugar.
6. Ajuste la tira central jalando de la tira inferior y central simultáneamente en sentido contrario hasta que esta última ciña la pierna con suavidad.
7. Ajuste la tira inferior jalando de la tira inferior y la lengüeta simultáneamente en sentido contrario hasta que la tira ciña la pierna con suavidad.
8. Repita los pasos 5 a 7 jalando de cada tira hasta que se adapte cómodamente. Cada tira debe superponerse levemente con la tira de arriba usando las ranuras en el extremo de la tira más cercana al cuerpo principal de la prenda.
9. El vendaje debe tener un ajuste ceñido pero no provocar dolor. Si siente dolor o molestia, o si las tiras están demasiado flojas, repita los pasos 6 a 8, ajustando el nivel de tensión que se aplica.

**Nota:** Consulte las instrucciones de cuidado y aplicación para el uso del segmento de vendaje de compresión Juzo para pie, pantorrilla y rodilla.  
Sujetadores adicionales se proporcionan dentro del empaque.

**Merci de choisir Juzo, un chef de file international dans les vêtements de compression médicaux depuis 1912.**

Fabriqué avec soin et le souci du détail, votre Bandage Compressif Juzo possède plusieurs caractéristiques qui offrent thérapie, confort, versatilité et ajustement supérieur, notamment :

- **Pression de travail** - Extensibilité courte pour une haute pression de travail.
- **Résiste aux écarts** - Des crans spéciaux et une superposition minimale des sangles résistent à la formation d’écarts et de gonflant.
- **Tirette EZ** - Aide pour une application sans problème.
- **Réversible** - Porté soit en beige ou en noir

**Inclus dans ce paquet :**

- Bandage compressif Juzo
- Fermetures à crochets Juzo

**Soin et entretien**

- Enlever toutes les fermetures à crochets en demi-cercle des sangles
- Laver à la machine à l’eau tiède
- Un sac de vêtements est fortement recommandé
- Séchage par culbutage à basse température
- NE PAS UTILISER : agent de blanchiment, chlore, assouplissants, ou autres additifs de blanchisserie
- Entreposer les vêtements dans un endroit sec à température ambiante

**Politique de retour**

S’il s’avère nécessaire de retourner votre vêtement pour une inspection, Juzo vous demande de bien le laver (pour des raisons hygiéniques) avant de le retourner au lieu d’achat d’origine.

**Tissu**

48% Nylon / 46% Polyurethane / 6% Spandex - Sin látex de caucho natural. Pas fait de latex en caoutchouc naturel.

**Mode d’emploi**

Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé et essayeur pour les bonnes directives sur l’utilisation et l’application de ce produit. Si vous ressentez une gêne quelconque, enlevez immédiatement le bandage compressif à extensibilité courte et consultez votre professionnel de la santé.

- Le Bandage compressif Juzo est conçu pour être réversible. Les fermetures à crochets en demi-cercle doivent être attachées au vêtement sur le côté opposé de la couleur à être portée.

**Indications**

Varices primaires et secondaires, insuffisance veineuse chronique, syndrome post-thrombotique, ulcères de stase veineuse, pré et post procédure veineuse et œdème lymphatique.

**Contre-indications**

Absolue : maladie artérielle périphérique, cardiopathies décompensées, phlébite septique, phelgmasia cerulea dolens.  
Relative : Infection de la jambe, intolérance à la compression ou aux tissus de vêtement, trouble sensoriel du membre.

**Mises en garde**

Aucun effet secondaire n’est actuellement connu. Toutefois, si un résultat négatif se produirait (c.-à-d. des irritations de la peau) suite à l’utilisation de nos produits, veuillez cesser l’utilisation du vêtement et consultez un professionnel de la santé. Le fabricant n’est pas responsable des dommages / blessures qui ont été causées par une manipulation incorrecte ou une mauvaise utilisation.

**Étapes pour mettre le Bandage pour la cuisse**

1. Le bandage pour la cuisse doit être placé après avoir mis le segment de Bandage pour le genou sur la jambe.
2. Attachez les fermetures à crochets aux sangles sur le côté opposé de la couleur à être portée. Par exemple, si beige est la couleur désirée, alors les fermetures doivent être appliquées au côté noir du vêtement.
3. Rabattez soigneusement les deux fermetures inférieures sur elles-mêmes pour empêcher que les fermetures s’attachent par inadvertance au vêtement. Chaque fermeture peut être alors dépliée avant d’attacher.
4. En position debout, le bas du bandage pour la cuisse devrait chevaucher la partie supérieure du bandage pour le genou.
5. Attachez bien la sangle supérieure du bandage pour la cuisse en contre-tirant la sangle supérieure et la tirette EZ supérieure en même temps. La sangle doit être juste suffisamment serrée pour mouler délicatement la cuisse et tenir le vêtement en place.
6. Attachez la sangle du milieu en contre-tirant simultanément la sangle centrale et inférieure jusqu’à ce que la sangle centrale enveloppe délicatement la jambe.
7. Attachez la sangle inférieure en contre-tirant simultanément la sangle inférieure et la tirette EZ jusqu’à ce que la sangle enveloppe délicatement la jambe.
8. Répétez les étapes 5 à 7 en tirant sur chaque sangle jusqu’à ce qu’elles soient confortablement ajustées. Chaque sangle devrait légèrement chevaucher la sangle au-dessus de celle-ci en utilisant les encoches intégrées à l’extrémité de la sangle la plus proche du corps principal du vêtement.
9. Le bandage devrait être bien ajusté mais pas douloureusement serré. Si vous ressentez de la douleur ou une gêne ou si le bandage semble trop détendu, alors répétez les étapes 6 à 8, en ajustant le niveau de tension qui est appliqué.

**Remarque :** Consultez les directives concernant le soin et l’application pour l’utilisation d’un Segment de mollet et pied, genou de Bandage compressif Juzo.  
Les fixations supplémentaires sont fournies à l’intérieur de l’emballage.